

# Ošetřovatelský proces při vyprazdňování

- Vyprazdňování je jednou ze základních lidských potřeb.
- Nemoc – hospitalizace
- Soběstačnost pacienta:
  - Soběstačný, chodící
  - Nechodící, schopní samostatného přesunu z lůžka
  - Upoutaní na lůžko, mobilní
  - Imobilní

# Soběstačný, chodící pacient

- Vyprazdňují se na WC nebo na pojízdném klozetu,
- Důraz na bezpečnost (signalizace, madla, dopomoc, doplňující zařízení ve vztahu k diagnóze pacienta,...)

# Bezpečnost



# Pacienti schopní přesunu mimo lůžko

- Křesla pojízdná, nepojízdná, umožňující zajet nad WC,...



## KŘESLA TOALETNÍ

9042



9062



9063



9062 XXL



139B



139



9100



# Použití....

- Zajet těsně k lůžku,
- Zabrzdit,
- Podpora pacienta – bezpečnost!!! Pády!!!
- Zajistit soukromí,
- Dopomoci s očistou genitálu, umytí rukou,
- Vyprázdnění kbelíku, dezinfekce (myčka),
- Není-li klozet individualizovaný provedeme celkovou dezinfekci křesla.



# Nástavce na WC po TEP





# Ležící – mobilní i imobilní pacienti

- Nepřirozená poloha pro vyprázdnění (břišní lis),
- Psychické zábrany,
- Častá obstipace!
- Podložní mísy, močové láhve.



# Podkládání podložní mísy



# Používání močové láhve



- Dva typy
- Graduované asi po 100 ml
- Objem kolem 1 000 ml
- Plat, sklo, papír
- Drátěný držák na bočnici
- Po použití mytí rukou pac.



# Péče o inkontinentní pacienty

- Inkontinence = únik moči nebo stolice, příp. obojí
- Častější močová u žen
- Psychosociální problémy
- Dekubity
- ↑ důraz na hygienickou péči


# Pomůcky pro inkontinentní

- INKO pomůcky: pojišťovna, dostupnost, dostatečnost, vhodnost podle typu inkontinence
- Denní nošení: označení Normal, Standard
- Noční: Super, Extra, Plus
- Indikátory naplněnosti pomůcky (moč), u stolice co nejdříve

# Co lze použít...



Obr. 36 *Elastické  
plenkové kalhotky*

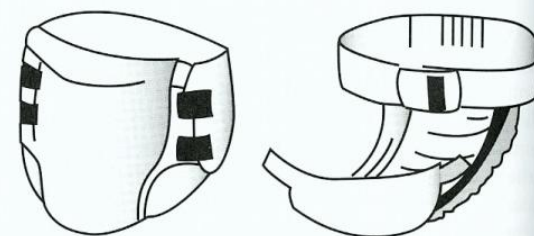

Obr. 37a-b) *Typy fixace plenkových kalhotek*

- Vložky,
- Vkládací pleny s elast. kalhotkami,
- Natahovací kalhotky,
- Plenkové lepící kalhotky,
- Kalhotky kombinované,
- Jednorázové podložky.



# Perfectly Engineered

## Feel drier and more confident with TENA Men

TENA Men is specifically designed for male bladder weakness. TENA Men provides long lasting protection, leaving you to get on with your day.



Try TENA Men for yourself with a FREE sample pack



Call 0845 3080 803 quoting - TENAMPE charged at UK standard local rate



Visit online [www.tenamen.co.uk](http://www.tenamen.co.uk)



Text TENAMPE your full name, First line of your address and postcode to 62277 (standard network rates apply)

Sample requests are limited to one per person in a 6 month period



# Pro dámy

Tena Her  
Designs



# Jak použít rady výrobce

## TENA *Pants* For independence

TENA *Pants* has all the premium features to provide increased independence with total comfort and security.

TENA *Pants* has added benefits for:



### Active and mobile

- Underwear-style design
- Breathable, soft and quiet material
- Odour protection for confidence



### Dementia

- Easy pull up design with tear away sides
- Underwear look and feel
- Highly absorbent with FeelDry technology\*



### Disability and/or restricted mobility

- Body-Close Fit for a more secure feeling
- Soft stretch elastics
- Leakage barriers and double leg cuffs for added protection\*



Open the TENA Men packaging and unfold the pad, removing the tab to expose the adhesive strip.



Make sure that the wide pad is positioned up



- 1 Body-Close Fit for a more secure feeling
- 2 FeelDry for excellent absorption\*
- 3 Soft breathable material for skin integrity
- 4 Underwear-like for easy use and to promote toileting



### Fitting guide



1. Pull up like underwear, ensure leg elastics are fitted well into the groin.



2. To remove – pull down like underwear or use the easy tear-away side seams.

\*Available on TENA Pants Normal, Plus and Super.

